

## UltraSnap™ | Surface ATP Test

UltraSnap, yüzeylerde ATP varlığının kontrolü için Hygiene™ luminometreleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan pratik bir test kitidir. UltraSnap, maksimum geri kazanım sağlayan önceden ıslatılmış bir svab ve tekrarlanabilir ve doğru sonuçlar almanıza olanak sağlayan benzersiz stabil sıvı ayıraç içermektedir. Hygiene™'nin patentli Snap-Valve™ teknolojisi test sonucunun kolayca ve hızla alınmasına yardımcı olur.

### Avantajları:

- Önceden ıslatılmış svab yüzeylerden yüksek geri kazanımı ve biyofilmin parçalanmasını mümkün kılar
- Benzersiz stabil sıvı ayıraç yüksek hassasiyet ve güvenilir sonuçlar sağlar
- %100 geri dönüştürülebilir plastikten imal edilmiştir
- Buzdolabı sıcaklığında (2-8 °C) 15 ay raf ömrü
- Oda sıcaklığında (1-25 °C) 4 hafta raf ömrü


### Hassasiyeti:

Hygiene System	UltraSnap™ Detection Limit
femtomoles ATP	10 fmol 1 fmol .1 fmol .01 fmol .001 fmol
ATP (mol)	$1 \times 10^{-14}$ $1 \times 10^{-15}$ $1 \times 10^{-16}$ $1 \times 10^{-17}$ $1 \times 10^{-18}$

SystemSURE Plus ●●●●●  
EnSURE ●●●●●

### Performansı:

UltraSnap'ın üstün performansı üçüncü taraf bağımsız bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilen çalışma ile valide edilmiştir. Bu çalışmada, UltraSnap ile rakiplerine nazaran mükemmel tekrarlanabilirlik, linearite, hassasiyet ve doğruluk değerleri elde edilmiştir.

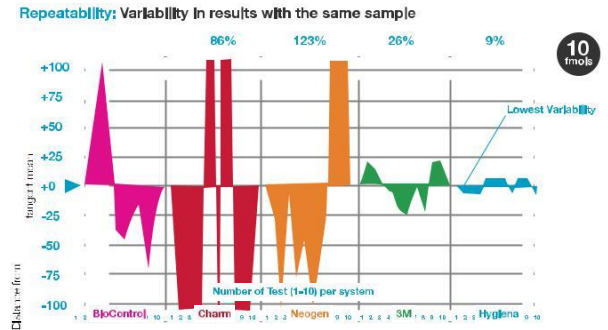

www.hygiene.com adresinden bu karşılaştırma çalışması hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz

Katalog No.

Ürün

Miktar

US2020

UltraSnap™ Surface ATP Test

100


Destek dokümanları, uygulama videoları ve daha fazlasını [www.hygiene.com](http://www.hygiene.com) adresinde bulabilirsiniz

[www.kemitekskimya.com.tr](http://www.kemitekskimya.com.tr)

[info@kemitekskimya.com.tr](mailto:info@kemitekskimya.com.tr)

+90 216 449 58 70

## UltraSnap Prosedürü

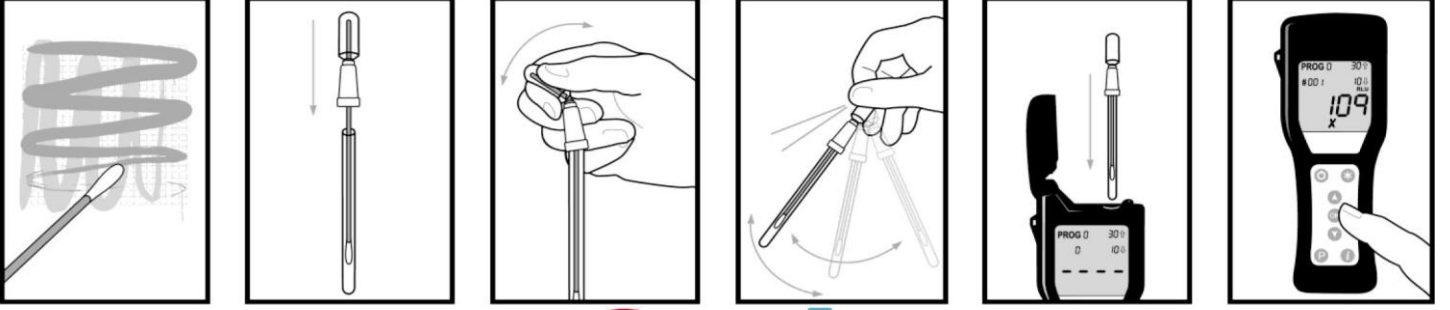

HygienaTV or HygienaTV' den uygulama videolarını izleyebilirsiniz.

## İlgili Ürünler



### SystemSURE Plus

SystemSURE, ATP hijyen kontrolünde kullanılan avuç içi boyutunda bir luminometredir. Kullanımı kolay, oldukça hassas ve ekonomik bu cihaz temizlik verimliliğini ve yüzeylerin ve sıvıların hijyenik durumunu kolaylıkla tespit etmenizi ve böylece ürün kalitesini garanti altına almanızı ve maliyetlerinizi düşürebilmenizi sağlar.



### EnSURE™ Monitoring System

EnSURE™ ATP hijyen kontrolünün yanı sıra mikrobiyolojik ve alerjen testlerinin ölçümlerinde kullanılan oldukça hassas bir luminometredir. EnSURE, SureTrend veri izleme yazılımını içermektedir.



### AquaSnap™ Water ATP Tests

AquaSnap™ sıvılar için ATP hijyen kontrol testidir ve yaklaşık 100 µL sıvıyı tutabilen benzersiz tasarıma sahip bir örnekleme ucuna sahiptir. Liyofilize enzimler yerine kullanılan stabil sıvı ayıraç sayesinde mükemmel tekrarlanabilirlik ve hassasiyete sahiptir. AquaSnap™ Total ve Free olarak iki farklı formda temin edilebilir.

### SuperSnap™ High Sensitivity Surface ATP Test

SuperSnap™, Hygiena'nın en hassas yüzey ATP hijyen kontrol kitidir ve Hygiena luminometreler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Oldukça düşük düzeyde ATP varlığını tespit edebilen SuperSnap, genellikle gıda ve içecek endüstrisinde alerjen çapraz kontaminasyonlarını engellemek için kullanılmaktadır.

Katalog No.	Ürün	Miktar
SS3	SystemSURE Plus ATP Monitoring System with SureTrend Software	1
ENSURE	EnSURE™ Monitoring System with SureTrend Software	1
AQ-100X	AquaSnap™ Free Water ATP Test	100
AQ-100FX	AquaSnap™ Total Water ATP test	100
SUS3000	SuperSnap™ High-Sensitivity Surface ATP Test	100

Destek dokümanları, uygulama videoları ve daha fazlasını [www.hygienea.com](http://www.hygienea.com) adresinde bulabilirsiniz

[www.kemitekskimya.com.tr](http://www.kemitekskimya.com.tr)

[info@kemitekskimya.com.tr](mailto:info@kemitekskimya.com.tr)

+90 216 449 58 70